


分配型蠕动泵

WT600-1F

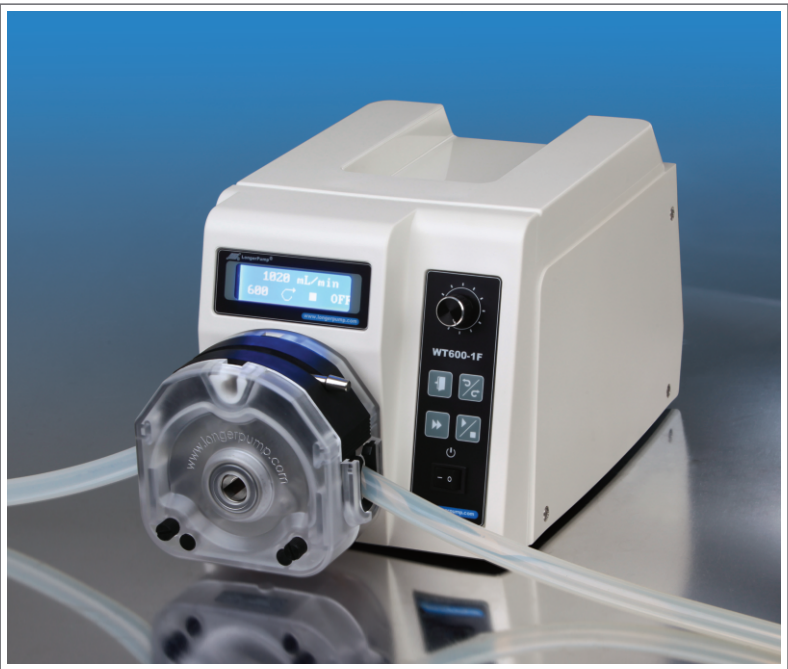

转速范围	10rpm-600rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	1rpm
控制方式	旋钮结合薄膜按键，支持外部信号控制和通信控制
显示方式	液晶显示
工作模式	流量模式和分配模式
流量校正	将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正
分配液量范围	0.1mL-99.9L
分配液量校正	将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正
分配次数范围	1次-9999次，“0”为无限循环方式
分配间隔时间范围	0.1s-99.9min，调整分辨率0.1s
回吸圈数范围	0-9.9圈，调整分辨率0.1圈
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制（4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选）
转速状态信号输出	166.7Hz-10kHz线性对应10-600rpm
启停状态信号输出	OC门信号输出
方向状态信号输出	OC门信号输出
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)	285×207×180 (mm)
适用电源	AC 110V±20%/140W或AC 220V±20%/140W可选
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	5.2kg

参考流量范围



- 实验室及小批量生产使用。
- 直流无刷电机，适合泵头串联。

适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25




KZ25



DMD15-13-B
DMD15-13-D



DG15-24

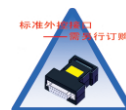

PERISTALTIC PUMP

驱动器型号 (产品编号, 适用电源)	适配泵头型号	适用软管规格	参考流量范围(mL/min)	重量(kg)
WT600-1F-A (05.02.65A, AC220V) WT600-1F-B (05.02.65B, AC110V)	(1、2、3)× YZ1515x	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	0.7-2200 (单泵头)	5.6-6.4
	(1、2、3)× YZII15			
	(1、2、3)× YZ2515x	15" 24"	17-1600 (单泵头)	5.6-6.0
	(1、2)× YZII25	15" 24" 35" 36"	17-3000 (单泵头)	
	DG15-24	16" 25" 17"	8-1800 (单通道)	6.0
	(1、2)× DMD15-13-B, DMD15-13-D	13" 14" 19" 16" 25"	1.5-2070 (单泵头)	5.6-6.0
	KZ25	15" 24" 35" 36"	34-6000	6.0