

分配型蠕动泵

最大参考流量



BT300-1F



- 主要在实验室使用

适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25




DMD15-13-B
DMD15-13-D



DG15-24

转速范围	1rpm-300rpm, 正反转可逆
转速调节分辨率	1rpm
控制方式	旋钮结合薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制
显示方式	液晶显示
工作模式	流量模式和分配模式
流量校正	将设定流量获得的实际流量值输入, 自动进行流量校正
分配液量范围	0.1mL-99.9L
分配液量校正	将设定分配液量获得的实际分配液量值输入, 自动进行分配液量校正
分配次数范围	0次-65000次, “0”为无限循环方式
分配间隔时间范围	0.1s-999s (0.1s-100s, 调整分辨率为0.1s; 100s-999s, 调整分辨率为1s)
回吸角度范围	0-360°, 调整分辨率18°
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0-5V、0-10V可选)
转速状态信号输出	0-5V线性对应1rpm-300rpm
启停状态信号输出	OC门信号输出
方向状态信号输出	OC门信号输出
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作, 用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)	202×160×239 (mm)
适用电源	AC 220V±10%/50W或AC 110V±10%/50W可选
工作环境温度	0°C~40°C
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	4.3kg

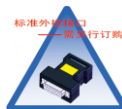

驱动器型号 (产品编号, 适用电源, 界面语言)	适配泵头型号	适用软管规格	最大参考流量(mL/min)	重量(kg)
BT300-1F-A (05.02.32A, AC220V, 中文)	YZ1515x, YZII15	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	1140	4.7
BT300-1F-B (05.02.32B, AC110V, 中文)	YZ2515x	15" 24"	840	
BT300-1F-C (05.02.32C, AC220V, 英文)	YZII25	15" 24" 35" 36"	1500	
BT300-1F-D (05.02.32D, AC110V, 英文)	DMD15-13-B, DMD15-13-D	13" 14" 19" 16" 25"	1040	4.7
	DG15-24	16" 25" 17"	900 (单通道)	5.1