


T100/T400 通信控制42一体机



- 采用42步进电机，电机驱动与电机集成为一体，体积小，结构紧凑
- 通过RS485 (支持Modbus RTU协议)对泵进行通信控制
- 可适配多种蠕动泵泵头，提供宽泛的流量范围

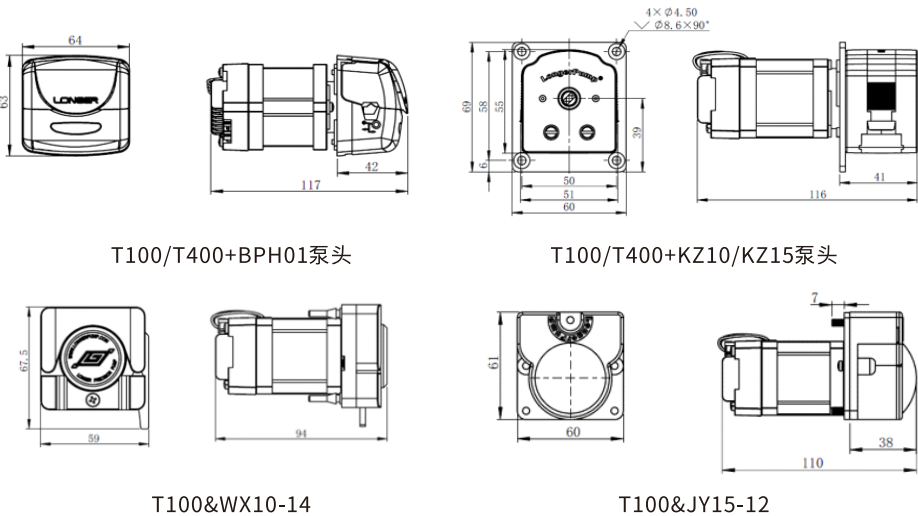

	T100-SC01&BPH01 T100-SC01&WX10-14-H	T100-SC01-02 T100-SC01&JY15-12-C	T400-SC01&BPH01 T400-SC01-02
转速范围	0-100rpm		0-400rpm
控制分辨率	Modbus协议:0.01rpm 兰格OEM协议:0.1rpm		Modbus协议:0.01rpm 兰格OEM协议:1rpm
控制功能	通过通信指令控制泵的转速、启停、方向和全速状态。泵的上电运行状态可设。 RS485接口,支持Modbus RTU协议和兰格OEM协议		
通信控制参数	波特率:1200bps,9600bps,19200bps,115200bps 校验位:无校验或偶校验 通信地址:1-32 停止位:1位停止位		
输出功能	DC5V 10mA		
适配电源要求	DC24V/8W		DC24V/12W
外形尺寸(L*W*H)	带BPH01泵头:117x64x63mm 带KZ15/KZ10泵头:116x60x69mm 带WX10泵头:94x59x67.5mm 带JY15-12泵头:110x60x61mm		
安装方式	面板安装		
工作环境参数	温度0℃-40℃,湿度<80%		
产品重量(含泵头)	带WX10泵头:0.47kg;带BPH01/JY15/KZ10/KZ15泵头:0.54kg		

驱动器型号	最大转速	适配泵头	适配软管	最大参考流量(mL/min)
T100-SC01-02	100rpm	KZ10	内径≤3.17mm,壁厚0.86mm	23
		KZ15	13#,14#,19#,16#	42
T400-SC01-02	400rpm	KZ10	内径≤3.17mm,壁厚0.86mm	92
		KZ15	13#,14#,19#,16#	168
T100-SC01&BPH01	100rpm	BPH01(已含)	13#,14#,19#,16#,25#	82
T400-SC01&BPH01	400rpm	BPH01(已含)	13#,14#,19#,16#,25#	340
T100-SC01&WX10-14-H	100rpm	WX10-14-H(已含)	内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm	40
T100-SC01&JY15-12-C	100rpm	JY15-12-C(已含)	25#,17#	170