


CM200-2B/CM400-2B





◎ 典型应用

细胞培养
微生物发酵
过滤层析
试剂滴定



无菌药品传输
水处理试剂投加
水处理水样输送
食品添加剂传输

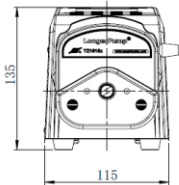


CM200/CM400+YZ15/YZ25

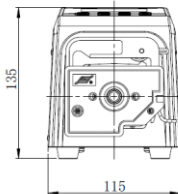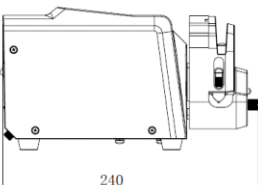

CM200/CM400+DG-1

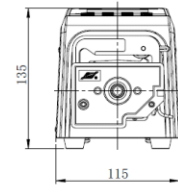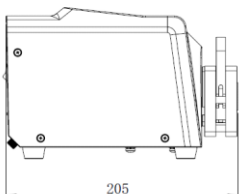

CM200/CM400+DG-2

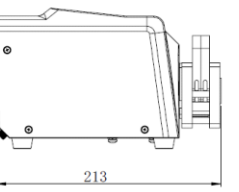

	CM200-2B	CM400-2B
转速范围	0-200rpm	0-400rpm
转速调节分辨率	0.01 rpm (转速<10rpm); 0.1rpm (10rpm≤转速<100rpm); 1rpm (100rpm≤转速≤最大转速)	
显示方式	断码液晶, 显示泵的转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式	
运行方向	顺时针或逆时针	
工作模式	连续传输, 定时传输	
控制方式	按键控制, 脚踏开关控制	
按键功能	控制泵的启停、方向、全速、调速; 设置泵的工作模式、定时时间	
脚踏开关控制	通过脚踏开关控制泵的启停	
定时功能	定时传输模式时, 泵按照设定的定时时间运行和停止。定时范围: 0.1s-999h	
累计时间功能	连续传输模式时, 自动记录运行时间, 可累计多次运行时间(上电重新计时)。计时范围: 0.1s-999h	
按键锁功能	防止错误操作	
上电运行状态	上电停止	
参数保存	运行参数和系统参数掉电保存	
全速功能	一键控制全速运行, 用于管路填充或排空等	
外形尺寸 (L*W*H)	175mmx115mmx135mm (不含泵头)	
适配器电源	AC100-240V, 50Hz-60Hz	
泵电源	DC24V/15W	DC24V/30W
工作环境	温度0℃-40℃, 湿度<80%	
防护等级	IP31	
重量	1.7kg (不含泵头)	

产品型号	适配泵头型号	转速范围	滚轮数量	通道数量	泵头材质	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)
CM200-2B (产品编号: 05.02.06A)	YZ1515x	≤200rpm	3	1	壳体: PESU或PPS 滚轮: 不锈钢	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	760
	YZ2515x		3	1		15#, 24#	540
	DG-1 (6滚轮)	≤100rpm	6	1	卡片: POM或PVDF 滚轮: 不锈钢	内径≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm	48(单通道)
	DG-1 (10滚轮)		10	1			32(单通道)
	DG-2 (6滚轮)		6	2			48(单通道)
	DG-2 (10滚轮)		10	2			32(单通道)
CM400-2B (产品编号: 05.02.06B)	YZ1515x	≤400rpm	3	1	壳体: PESU或PPS 滚轮: 不锈钢	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	1520
	YZ2515x		3	1		15#, 24#	1120