

基本型蠕动泵

BT100-3J



转速范围	0.1rpm-100rpm, 正反转可逆。
转速调节分辨率	0.1rpm
控制方式	薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制。
显示方式	3位LED转速显示
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作, 用于填充、排空等。
外形尺寸(长×宽×高)	232×142×149 (mm)
适用电源	AC 100V-240V 50/60Hz
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP20
重量	2.3kg



适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZ1115
YZ1125



BZ15
BZ25



DMD15-13-B
DMD15-13-D



DG-1




DG-2



DG15-24
DG15-28

CE
RoHS

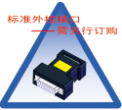

- 主要在实验室使用
- 应用最普遍的基本机型

型号	产品编号	适配泵头型号	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)
BT100-3J	05.02.11B	YZ1515x(3 滚轮), YZ1115	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	380
		YZ2515x, YZ1125	15" 24"	270
		DMD15-13-B, DMD15-13-D	2×13", 2×14", 2×19", 2×16", 2×25"	350
		BZ15-13-A	14"	22
		BZ15-13-B	16"	80
		BZ15-13-C	25"	150
		BZ15-13-D	17"	270
		BZ25-13-B	24"	250
		DG-1, DG-2, DG-4(6 滚轮)	内径≤3.17mm, 壁厚 0.8-1mm	48 (单通道)
		DG-1, DG-2, DG-4(10 滚轮)		32 (单通道)
		DG15-24	16", 25", 17"	300 (单通道)
		DG15-28	内径≤3.17mm, 壁厚 0.8-1mm	75 (单通道)
			13", 14"	75 (单通道)