

用户调速型OEM蠕动泵


最大参考流量



T100/T300/T600 通信控制57一体机



- 采用57步进电机,电机驱动与电机集成为一体,体积小巧,结构紧凑
- 通过RS485 (支持Modbus RTU协议)对泵进行通信控制
- 可适配多种蠕动泵泵头,提供宽泛的流量范围

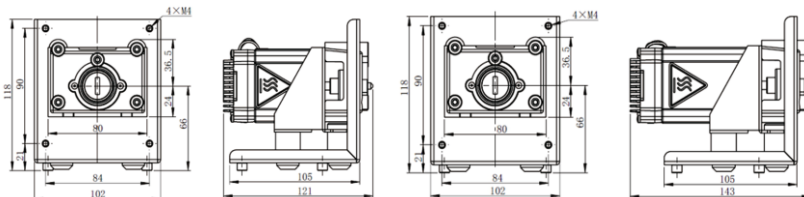

T100系列

T300系列/T600系列

	T100-SC02-01	T300-SC02-01	T600-SC02-01
转速范围	0-100rpm	0-300rpm	0-600rpm
控制分辨率	最小控制分辨率:0.01rpm		
控制功能	通过通信指令控制泵的转速、启停、方向和全速状态。泵的上电运行状态可设。 RS485接口,支持Modbus RTU协议和兰格OEM协议		
通信控制参数	波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校验位:无校验或偶校验 通信地址:1-32 停止位:1位停止位		
输出功能	DC5V 100mA		
适配电源要求	DC24V/15W	DC24V/45W	DC24V/55W
外形尺寸(L*W*H)	121*102*118mm	143*102*118mm	
安装方式	支持面板安装或者底板安装		
工作环境参数	温度0℃-40℃,湿度<80%		
产品重量(不含泵头)	1.29kg	1.61kg	

适配泵头	适配软管	最大参考流量(mL/min) T100-SC02-01	最大参考流量(mL/min) T300-SC02-01	最大参考流量(mL/min) T600-SC02-01
YZ1515X,YZ1115	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#	380	1100	2200
YZ2515X	15#,24#	270	800	1600
YZ1125	15#,24#,35#,36#	500	1500	3000
FG15-13	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#	430	1200	2400
FG25-13	15#,24#	320	1100	2200
DMD15-13-B DMD15-13-D	2x13#,2x14#,2x19#,2x16#,2x25#	375	1035	2070
BZ15-13-A	14#	22	75	150
BZ15-13-B	16#	80	230	460
BZ15-14-C	25#	150	480	960
BZ15-14-D	17#	270	800	1600
BZ25-13-B	24#	250	800	1600
DG15-24	16#,25#,17#	300(单通道)	900(单通道)	1800(单通道)
DG15-28	13#,14# 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	75(单通道)	不推荐	不推荐
DG-(1,2,4,6,8) 6滚轮	内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	48(单通道)	不推荐	不推荐
DG-(1,2,4) 10滚轮	内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm	32(单通道)	不推荐	不推荐
BPH01	13#, 14#, 19#, 16#, 25#	82	260	530