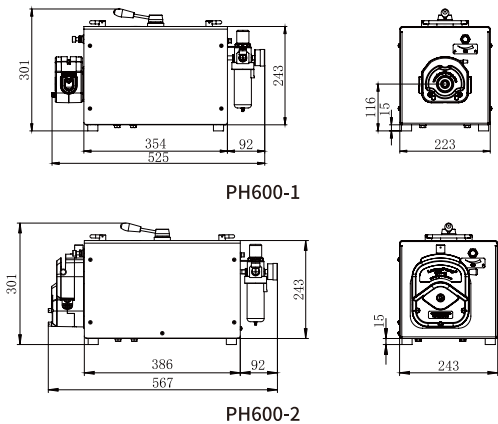




- 气动马达作为驱动单元,压缩空气作为动力源,无电气元件,适合于高温、潮湿或有易燃易爆气体的工作场合
- 高品质气动马达属于免维护型,不用加油,配备气动二联件,完成气体过滤和压力调节,避免污染工作环境
- 通过节流阀进行无极调速,适配多种泵头和软管,提供宽泛流量范围
- 采用不锈钢壳体,耐腐蚀,易于清洁

驱动器型号	PH600-1	PH600-2
转速范围	150-600(rpm), 低于150rpm转速不稳	
运行方向	正反转可逆	
控制方式	手动控制 调速:通过节流阀无极调速 启停/方向:通过换向阀启动停止和切换方向	
显示	气动二联件压力表显示气源压力	
额定气源压力	0.6MPa	
最大耗气量	3.7L/s	4.4L/s
壳体材质	不锈钢	
进气管	ID*OD 10x6.5mm PU	ID*OD 12x8mm PU
过载保护功能	过载时气动马达会降低转速或直接停止,当过载解除时会重新恢复正常运转	
工作环境温度	0-60℃	
外形尺寸(L×W×H)	446*223*301(mm)	478*243*301(mm)
重量(不含泵头)	17kg	18kg
噪音	<85dB	

驱动器型号(物料编码)	适配泵头型号	软管	单通道参考流量范围 (150rpm-600rpm)	重量(kg)
PH600-1 (05.63.080)	(1,2,3,4) × YZ1515x/ YZ1115	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	10mL/min-2200mL/min	17.4-18.6
	(1,2,3,4) × YZ2515x	15#, 24#	240mL/min-1600mL/min	17.4-18.6
	(1,2) × YZ1125	15#, 24#, 35#, 36#	240mL/min-3000mL/min	17.4-18.6
	(1,2) × KZ25	15#, 24#, 35#, 36#	450mL/min-6000mL/min	17.8-18.6
PH600-2 (05.63.081)	YZ35-13-A	73#, 82#	1.5L/min-11L/min	19.7
	YZ35-13-E	26#	1L/min-4L/min	19.7
	KZ35-13-A	26#, 73#, 82#	1L/min-11L/min	21.7